



HexaLux™
EXAMINATION LIGHT



 STERIS



La luz...

Esencial. En cualquier parte.

Lámpara de examen



STERIS, avalada por sus 14 000 colaboradores repartidos por todo el mundo, es una empresa líder en el sector sanitario. **STERIS**, con más de 25 000 clientes en más de 80 países, interviene en todo el quirófano y ofrece el concepto **ORigami™**, una solución completa : mesas de operaciones, lámparas quirúrgicas, brazos de distribución, sistemas de integración, estructuras y paneles desmontables etc. Todo se ha pensado, coordinado y optimizado para ofrecer todos los días un servicio de excepcional calidad.

STERIS ofrece también tecnologías de prevención de infecciones a través de **STERIS IPT** (*Infection Prevention Technology o Tecnología de prevención de infecciones*) : limpiadores, desinfectadores, esterilizadores y consumibles.



Una lámpara fabricada en Francia

HexaLux™ se distribuye en todo el mundo y se fabrica en Francia, en una planta de producción de una amplia gama de equipos de quirófano. Esta variedad nos permite ofrecer productos de máxima calidad, tanto a nivel industrial como ambiental :

- Proximidad y consideración de las necesidades específicas de los usuarios franceses y europeos
- Dominio completo de los procesos industriales
- Integración de los mejores proveedores europeos, favoreciendo a los proveedores locales
- Reducción de la huella ecológica



Los productos de **STERIS** se desarrollan y fabrican respetando el medio ambiente y teniendo en cuenta el desarrollo sostenible.

Ahora más que nunca, nuestros valores de integridad, trabajo en equipo, enfoque en los resultados, además de la búsqueda de mejora constante de nuestros productos y procesos, representan nuestro futuro.

En STERIS damos importancia a la seguridad, el medio ambiente, la integridad y el respeto mutuo, apoyando a nuestros empleados, a nuestros Clientes y a los pacientes, cumpliendo siempre todas las normativas vigentes.



*Unidad de producción de lámparas quirúrgicas
STERIS (Le Haillan, France)*

Una nueva generación de lámparas de examen

¡Un especialista del quirófano al servicio de todo el hospital!

Una buena iluminación facilita el trabajo diario : fiabilidad del diagnóstico, seguridad de los pacientes, disminución de la fatiga ocular...

STERIS, especialista en equipos de quirófano, ofrece a todos los profesionales la posibilidad de utilizar sus nuevas lámparas de examen, ergonómicas y polivalentes : [HexaLux™](#).

[HexaLux™](#) combina tecnología de alto nivel, procedente del quirófano, con una sorprendente facilidad de uso utilización. Todas estas ventajas, hacen que sea una lámpara ideal para un amplio número de aplicaciones médicas y hospitalarias.

[HexaLux™](#), un desarrollo con la firma **STERIS**

En **STERIS**, el pragmatismo es la base de la innovación. Las necesidades reales de los usuarios son las que guían el desarrollo de nuestros productos.

Nuestro objetivo: la innovación útil.



HexaLux™, ¡una lámpara polivalente indispensable en cualquier parte!

[HexaLux™](#) cubre una amplísima gama de aplicaciones :

- Salas de examen
- Urgencias
- Salas de yesos
- Cuidados intensivos
- Reanimación
- Cirugía menor
- Salas de inducción y de recuperación
- Neonatología
- Servicios pediátricos
- Maternidad
- Morgue

Iluminación de excepcional calidad

Materiales de calidad

STERIS utiliza sus conocimientos y experiencia para diseñar lámparas quirúrgicas destinadas a la iluminación durante exámenes médicos. **HexaLux™** se ha diseñado con materiales de calidad que garantizan un rendimiento constante en cualquier aplicación (pequeñas heridas, suturas, exámenes clínicos, diagnósticos, etc.).

Cúpulas de aluminio

La cúpula de **HexaLux™**, de fundición de aluminio, ofrece robustez y ligereza, ofreciendo gran comodidad de uso. Su magnífica disipación del calor permite mantener en el tiempo las prestaciones de la lámpara.

Leds de primera gama y calidad óptica superior

La lámpara de examen **HexaLux™** ofrece una luz blanca (4400 K) y homogénea, con una excelente reproducción de los colores (Ra = 95), en particular en el caso de la piel (R13 = 97) y los tonos rojos (R9 = 97). Una gran fiabilidad para el diagnóstico. Su vida útil, superior a 50 000 horas, a cumple las exigencias de una utilización diaria.

A prueba de uso diario

No hay nada que tenga mayor uso y desgaste que las lámparas de examen. Se desplazan de lugar, se repliegan y se manipulan constantemente, sometiénolas a una dura prueba de resistencia. **HexaLux™** es una lámpara de examen robusta, diseñada para resistir un uso diario intensivo.

Un uso intuitivo

One-Click control

Para facilitar el uso, puede accederse directamente a todas las funciones de **HexaLux™** desde el mango central :

- Encender o apagar la luz,
- Ajustar la intensidad luminosa,
- Ajustar el diámetro de la mancha luminosa.

"One-click control", una ventaja única

Al poder ajustarse y manejarse con una mano, HexaLux™ permite al médico concentrarse en lo esencial : el paciente.


El mango puede esterilizarse, facilitando así el uso estéril para las operaciones quirúrgicas menores.

Los ajustes se realizan de forma muy intuitiva : ¡basta con girar el mango!

Gracias a su diseño,

la cúpula **HexaLux™** se manipula con gran facilidad :

- Forma triangular que permite un agarre en toda la superficie,
- Rotación de 360° de la cúpula para adaptarse a todas las limitaciones de visualización,
- Dos arcos laterales para un agarre seguro y cómodo.

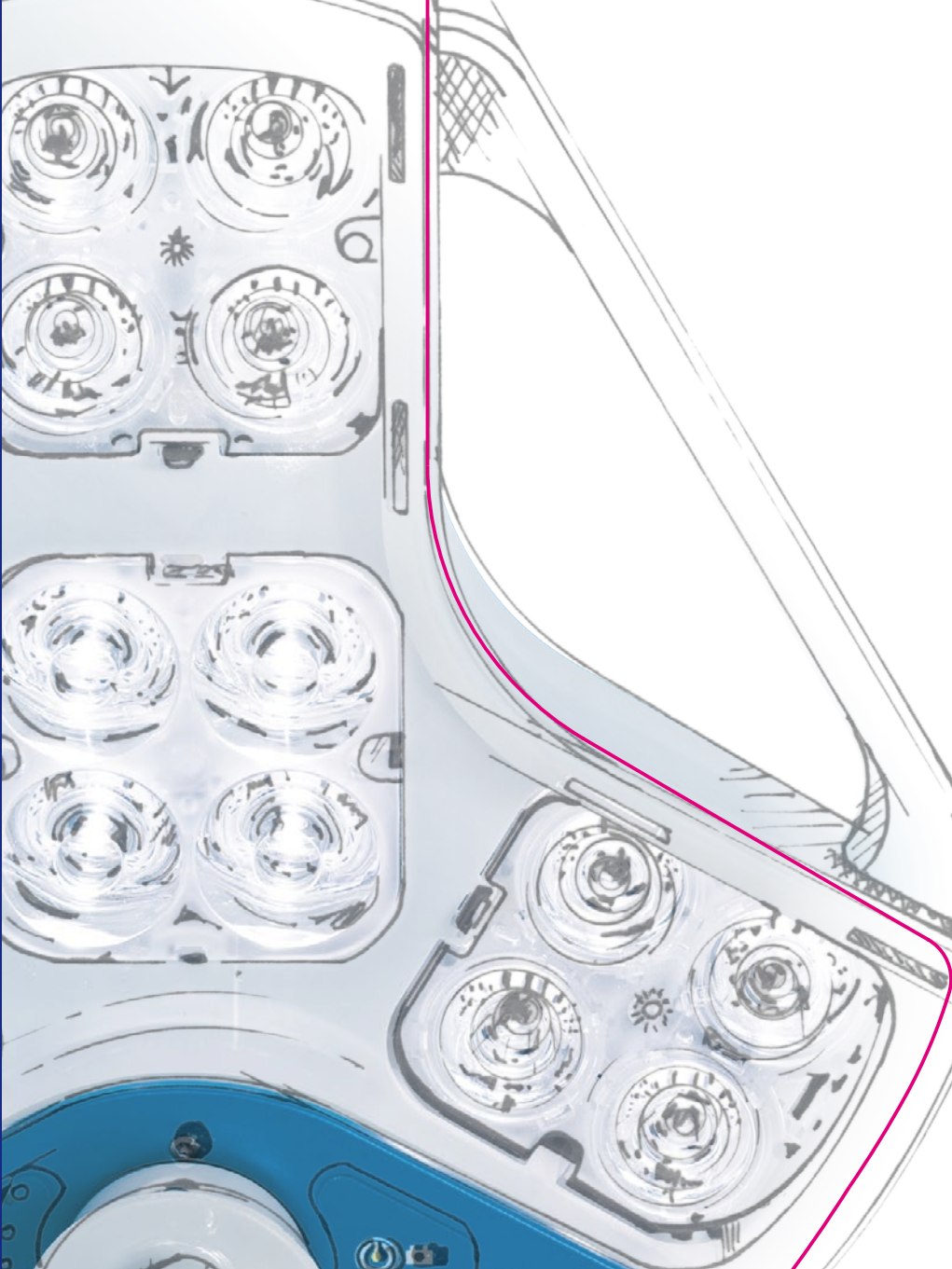



Una lámpara, varias configuraciones

Para adaptarse a todo tipo de aplicaciones, **HexaLux™** está disponible en tres configuraciones : con soporte mural, soporte de techo o de base móvil.

HexaLux™

EXAMINATION LIGHT

Versión de techo

La versión de techo de la lámpara de examen HexaLux™ puede adaptarse a techos de diferente altura. Abarca una amplia superficie radial, lo que ofrece una gran libertad de movimiento y permite acercarse al máximo a la zona que se desee examinar.



HexaLux™

EXAMINATION LIGHT

Versión mural

La versión mural de la lámpara de examen HexaLux™ ofrece al mismo tiempo una gran envergadura para iluminar más cerca y también puede plegarse cuando no se esté utilizando, dejando espacio libre.



HexaLux™

EXAMINATION LIGHT

Versiones móviles

Las versiones móviles permiten una utilización portátil, idónea para diversas aplicaciones. La versión móvil con batería integrada es especialmente útil ya que ofrece una gran autonomía. Además, cuenta con un abanico de accesorios que aporta aún más soluciones prácticas en el entorno clínico.

Portátil

- Hasta 6,5 horas de autonomía gracias a la batería opcional
- Muy manejable gracias a sus 5 ruedas giratorias con frenos
- Percha para enganchar el cable en caso de utilización sin enrollador.

Funcional

- Posibilidad de incluir una bandeja y un cestillo opcional que permite tener a mano el historial del paciente, los accesorios, instrumental, las compresas etc.

Estable y compacta

- Ocupa poco espacio en el suelo
- Estabilidad máxima de la base
- Enrollador de cable automático (opcional) para evitar que haya cables en el suelo
- Mástil plegable para que ocupe menos espacio al guardarla.

Versión móvil con posibilidad de añadir batería, enrollador mecánico de cable de red, cesta y bandeja.

¡Un especialista del quirófano al servicio de todo el hospital!



Cuidados intensivos



Salas de examen



Maternidad



Salas de consulta



Cirugía menor

¡una lámpara polivalente HexaLux™ indispensable en cualquier parte!





Fácil de limpiar y esterilizar

- Mango esterilizable que se encaja y se extrae con facilidad.
- Base lisa, fácil de limpiar.



Características técnicas

HexaLux™
EXAMINATION LIGHT
Versión mural

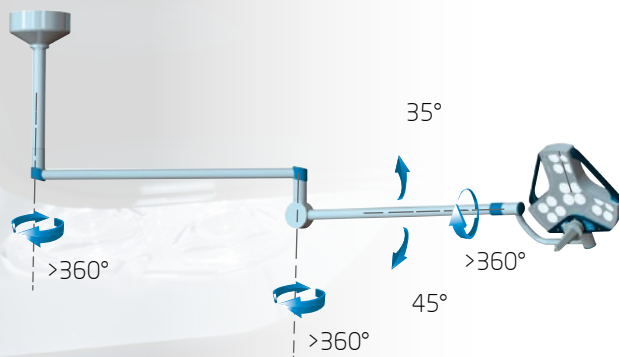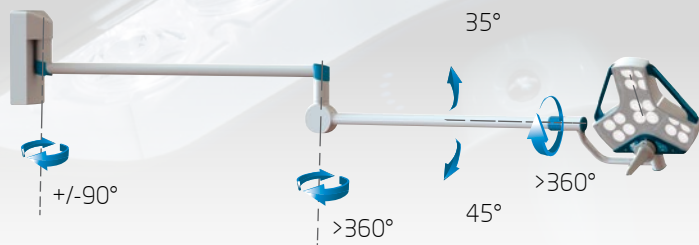

HexaLux™
EXAMINATION LIGHT
Versión de techo



HexaLux™
EXAMINATION LIGHT
Versiones móviles

Características	HexaLux™
Intensidad luminosa (Ec) en Lux *	De 10 000 a 65 000 Lux
Temperatura de color (Kelvin)	4 400 K
Índice de reproducción cromática Ra	95
Índice de reproducción del rojo R9	97
Índice de reproducción cromática de piel caucásica R13	97
Diámetro del campo luminoso (cm) *	De 14 a 20,5 cm

* Medidas realizadas entre 85 cm y 100 cm

La lámpara de examen HexaLux™ es un dispositivo médico de clase I. Lea atentamente las instrucciones que figuran en el manual de uso y en el etiquetado para emplear este equipo con total seguridad.



STERIS

STERIS SAS

116 Avenue Magudas
33185 Le Haillan (Bordeaux) - France
Tel: + 33 (0)5 56 93 94 94
Fax: + 33 (0)5 56 93 94 95
Email : contact_hc@steris.com
www.steris-healthcare.com
www.steris-accessories.com

STERIS Corporation

5960 Heisley Road - Mentor,
OH 44060-1834 - USA
Tel: + 1 440-354-2600
Fax: + 1 440-639-4457
www.steris.com

ASIAN Headquarters

STERIS SINGAPORE PTE LTD
3 International Business Park
#01-20 Nordic European Center
Singapore 609927
Tel: + 65 6841 7677
Email: APCS@steris.com

STERIS OFFICES WORLDWIDE

Belgium: + 32 3 304 95 44
Canada: + 905 677 0863
China: + 86 21 6137 1166
France: + 33 5 56 93 94 94
Germany: + 49 221 4661 20 30
India: + 91 22 4322 1616
Italy: + 39 02 213 034 1
Japan: + 81 3 5210 1521
Latin America: + 55 11 3372 9499
Malaysia: + 60 3 7954 9822
Russia: + 7 499 737 7733
Spain: + 34 91 658 5920
Switzerland: + 41 (0) 32 376 02 00

ESCHMANN Equipment

A Subsidiary of STERIS Corporation
Eschmann House
15 Peter Road
Lancing Business Park
Lancing, West Sussex BN15 8TJ
Tel: + 44 1903 753322
Fax: + 44 1903 875789
Email: info@eschmann.co.uk
www.eschmann.co.uk

ESENCIAL. EN CUALQUIER PARTE.